

## 標準品添付文書

\*\*\*\*\*

### 日本薬局方 残留溶媒クラス1標準品 Lot RS1c06A

\*\*\*\*\*

#### 《容量》

約 1.2 mL／管（3 管／箱）

本品はジメチルスルホキシドに下記溶媒を混合したものである。

ベンゼン：10.01 mg/mL

四塩化炭素：20.02 mg/mL

1,2-ジクロロエタン：25.00 mg/mL

1,1-ジクロロエテン：40.07 mg/mL

1,1,1-トリクロロエタン：50.03 mg/mL

#### 《保管条件》

遮光し、室温で保存。ただし、凝固を避ける。

#### 《用途》

・日局一般試験法「2.46 残留溶媒」：II. 残留溶媒の確認，定量法\*

\*上記の試験におけるクロマトグラムは図1及び図2のとおりである。なお、情報提供のみを目的としている。

#### 《注意事項》

本品は開封前によく振り混ぜること。

#### 《適用法令》

・毒物及び劇物取締法（劇物）

・消防法（危険物第四類 第三石油類 危険等級III 水溶性 火気厳禁 ジメチルスルホキシド）

---

#### <試験法の略号>

LC：液体クロマトグラフィー，GC：ガスクロマトグラフィー，TLC：薄層クロマトグラフィー

<使用上の注意>

1. 当財団が頒布する標準品は、全て分析用の試薬です。医薬品あるいは臨床診断薬ではありませんので、人体あるいは動物に用いることはできません。
2. 当財団が頒布する標準品は、公定規格書に規定された用途の試験に用いるのに適切な品質を有することを保証したものです。規定された用途は、各標準品の添付文書の《用途》に記載しています。それら以外の試験に使用される場合は、品質の保証はありませんのでご注意ください。
3. 標準品は必要時に必要量入手し、入手後は添付文書の《保管条件》および外装ラベルに記載している保管条件に従って適切に保存して、速やかにご使用ください。開封後に保存された標準品の品質は保証いたしません。
4. 使用上の詳細な注意事項は、当財団医薬標準品センターWebサイトの「使用上の注意」をご確認ください。
5. 標準品のSDSは、オンラインストアの各標準品のページでご確認ください。
6. 標準品の試験データは開示しません。また試験成績書は発行いたしません。

<使用保証期限>

1. 当財団が頒布する標準品の使用保証期限は、当該ロットの頒布（出荷）終了から1年後とします（別に指定するものを除く）。ただし、ご購入後すぐに当該ロットの頒布が終了することがありますので、この場合の使用保証期限は、ご購入品の出荷から1年後になります。従って、ご購入から最短の使用保証期限までの期間は約1年間になります。なお、標準品は必要時に必要量入手し、入手後は指定された条件で保管して、使用保証期限内であっても、できるだけ速やかにご使用ください。
2. オンラインストアの各標準品のページに、頒布中のロット（現行ロット）の番号を示し、頒布が終了したロットについては使用保証期限の年月日を明記します。また、別に指定するものについては、各標準品のページに詳細を示します。

<保存温度について>

指定温度	温度範囲
室温	1 ~ 30°C
25°C以下	1 ~ 25°C
冷蔵（8°C以下）	1 ~ 8°C
冷凍（-20°C以下）	-20°C以下
冷凍（-20 ~ -30°C）	-20°C以下。ただし、容器の耐低温性の点から-30°Cより低い温度での保存を避けてください。
冷凍（-80°C）	-80 ± 10°C

<問い合わせ先>

一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団  
 医薬標準品センター 標準品事業部

※ 医薬標準品センターWebサイトの「お問い合わせフォーム」からお問い合わせを受付けています。

\*\*\*\*\*

【製造・頒布】

一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団  
 日本薬局方標準品を製造する者の登録に関する省令（平成19年厚生労働省令第117号）登録機関  
 添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程（平成16年厚生労働省告示第219号）登録機関  
 薄層クロマトグラフ用標準品を製造する者の登録に関する省令（平成16年厚生労働省令第86号）登録機関

## Reference Standard – L E A F L E T

\*\*\*\*\*

### Japanese Pharmacopoeia

## Residual Solvents Class 1 Reference Standard

### Lot RS1c06A

\*\*\*\*\*

#### 《Unit Quantity》

approximately 1.2 mL/ampoule (3 ampoules/box)

This reference standard contains the following solvents in dimethylsulfoxide.

Benzene: 10.01 mg/mL

Carbon Tetrachloride: 20.02 mg/mL

1,2-Dichloroethane: 25.00 mg/mL

1,1-Dichloroethene: 40.07 mg/mL

1,1,1-Trichloroethane: 50.03 mg/mL

#### 《Storage Conditions》

Protect from light and store at room temperature avoiding freezing.

#### 《Intended Uses》

- JP General Tests '2.46 Residual Solvents':II. Identification and quantification of residual solvents\*

\* The chromatograms obtained by above test are shown in Fig.1 and Fig.2, and those are supplied for information only.

#### 《Handling Note》

Mix thoroughly before opening.

---

#### <Test Method Abbreviations>

LC: Liquid Chromatography, GC: Gas Chromatography, TLC: Thin-Layer Chromatography

**Precautions**

1. All the reference standards distributed by PMRJ are analytical reagents. They are not drugs or clinical diagnostic drugs, so they must not be used in humans or animals.
2. The reference standards distributed by PMRJ are guaranteed to be suitable for uses specified in the official compendia. The specified uses are given in the Intended Uses section of the leaflet for each reference standard. Please be aware that the quality of the reference standards is not guaranteed if they are used in tests other than those in which their use is specified.
3. Order only quantities that can be used immediately. After receipt of the reference standards, immediately store each reference standard according to its exterior label and the Storage Conditions section of its leaflet and use it. The quality of a reference standard cannot be guaranteed if it has been stored after opening.
4. For details on how to use, please check the "Instructions for Use" on the PMRJ website.
5. The Safety Data Sheet (SDS) for each reference standard can be accessed from the reference standard's webpage.
6. Test data of the reference standards are not disclosed, and certificates of analysis for the reference standards are not issued.

**Valid use date**

1. The valid use date assigned for the reference standards distributed by PMRJ is one year from the end of distributing a lot (excluding items specified separately). Once the distribution of the lot ends immediately after your purchase, one year, which is the shortest term, is assigned as the valid use date from the shipping date of the items you purchase. Please order only the required amount of the reference standards that can be used immediately and store the reference standards under the specified conditions after their receipt. Please use the reference standards as soon as possible even if it is still within the valid use date.
2. The current lot number being distributed can be found on the webpage for each reference standard in the PMRJ online store. Once the distribution of a lot ends, the valid use date for the lot can be found on the webpage in the PMRJ online store. For items specified separately, the details can be found on the webpage for each reference standard.

The storage temperatures are defined as follows:

Designated temperature	Temperature range
Room Temperature	1 – 30°C
≤25°C	1 – 25°C
Refrigerate (≤8°C)	1 – 8°C
Freeze (≤-20°C)	≤-20°C
Freeze (-20 – -30°C)	≤-20°C. Avoid storage below -30°C because the container may not withstand such low temperatures.
Freeze (-80°C)	-80 ± 10°C

**Contact Details**

Pharmaceutical and Medical Device Regulatory Science Society of Japan  
 Pharmaceutical Reference Standards Center  
 Department of Reference Standards  
 e-mail : jprslab-std@pmrj.jp

\*\*\*\*\*

**Production and Distribution**

Pharmaceutical and Medical Device Regulatory Science Society of Japan (PMRJ)

残留溶媒クラス1標準品 (Lot RS1c06A) のクロマトグラム  
 Chromatograms of Residual Solvents Class 1 Reference Standard (Lot RS1c06A)

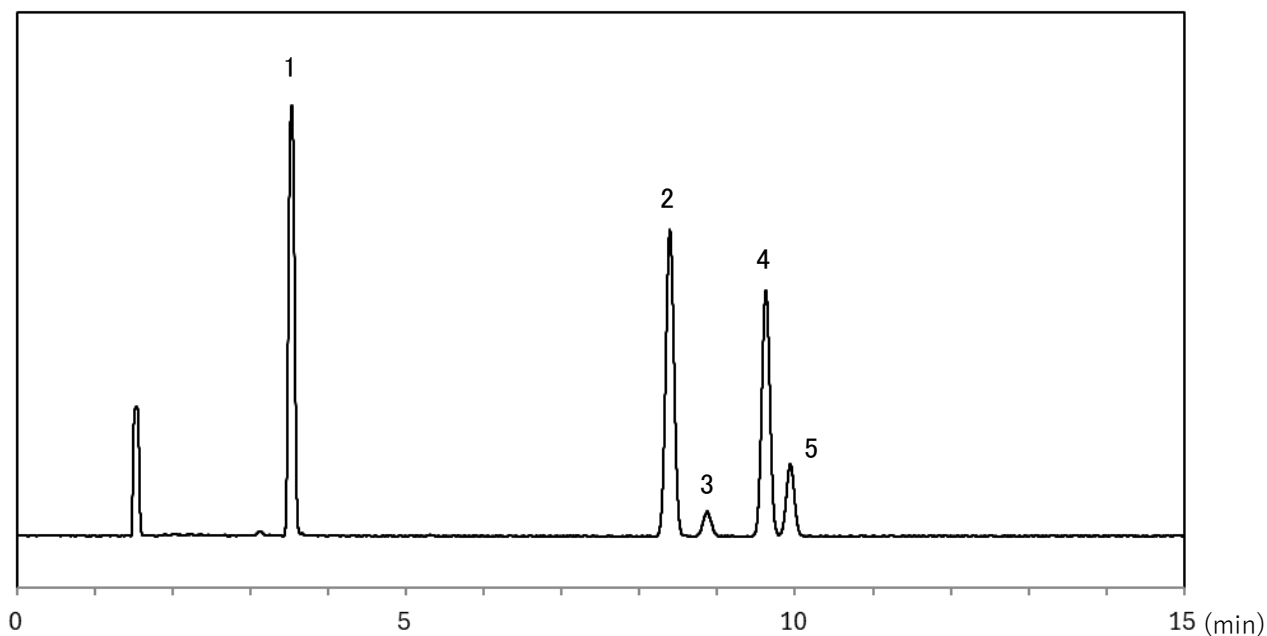


図1. 日局一般試験法「2.46 残留溶媒」：Ⅱ. 残留溶媒の確認, 定量法の操作法A

Fig.1. JP General Tests '2.46 Residual Solvents': Ⅱ. Identification and quantification of residual solvents, Procedure A

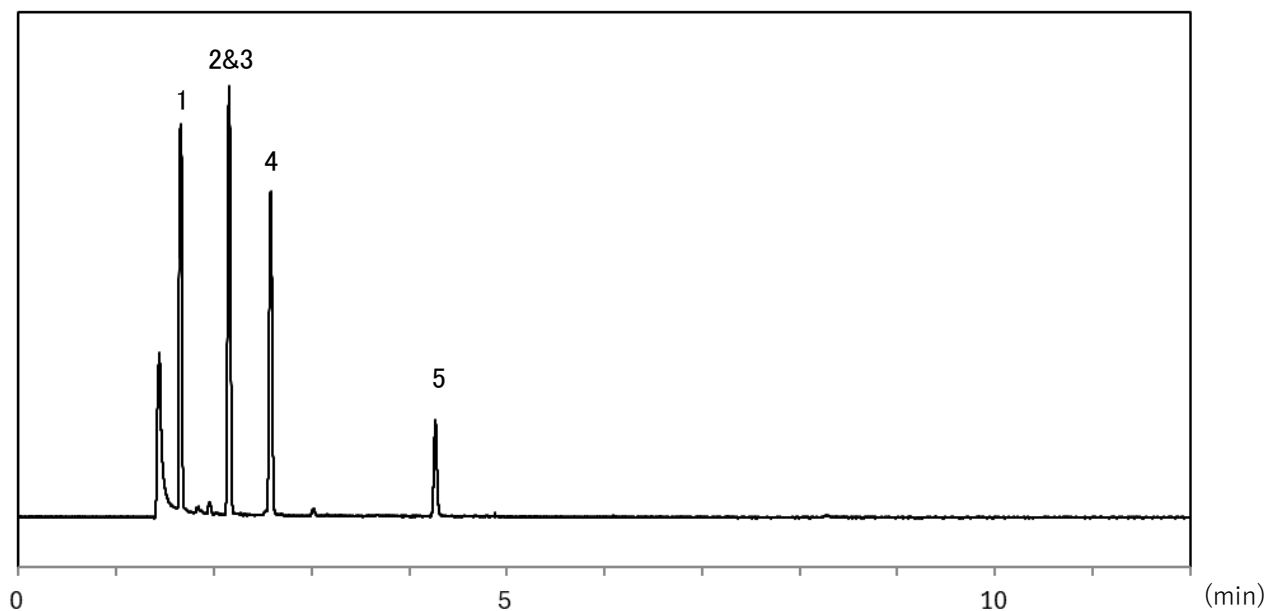


図2. 日局一般試験法「2.46 残留溶媒」：Ⅱ. 残留溶媒の確認, 定量法の操作法B

Fig.2. JP General Tests '2.46 Residual Solvents': Ⅱ. Identification and quantification of residual solvents, Procedure B

- |  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| 1. 1,1-ジクロロエテン<br>(1,1-Dichloroethene)       | 3. 四塩化炭素<br>(Carbon Tetrachloride) | 5. 1,2-ジクロロエタン<br>(1,2-Dichloroethane) |
| 2. 1,1,1-トリクロロエタン<br>(1,1,1-Trichloroethane) | 4. ベンゼン<br>(Benzene)               |  |